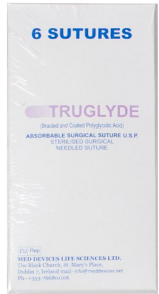






THD SLIDE

THD SUTURE	THD SLIDE	THD DOPPLER PROBE
		

Utilizzo

THD Slide è stato specificatamente disegnato per un utilizzo immediato con il dearterializzatore THD Evolution/THD Revolution.

Descrizione Generale

THD Slide è un anoscopio/proctoscopio appositamente progettato per un miglior utilizzo della procedura THD nel trattamento dei gradi più alti della patologia emorroidaria. La particolare forma dell'anoscopio/proctoscopio Slide, con la presenza di un carrello estraibile rende possibile realizzare legatura e risoluzione del prollasso con un solo strumento, causando quindi un minor disagio al paziente e velocizzando la procedura. L'anoscopio/proctoscopio THD Slide è realizzato in materiale plastico medico trasparente, per permettere, insieme all'utilizzo di un puntale a fibre ottiche appositamente sagomato, un'illuminazione perfetta del campo operatorio. L'anoscopio/proctoscopio specifico THD Slide è appositamente progettato per dare la giusta tensione alla cavità anale durante l'intervento e ha un apposito alloggiamento per il porta ago THD. La sonda doppler fornita si inserisce all'interno dell'anoscopio/proctoscopio ed è a diretto contatto con la mucosa per una precisa identificazione delle arterie emorroidarie. Il box comprende 2 sonde doppler riutilizzabili da 5 utilizzi, 10 confezioni di suture per legature da 6 suture cadauna e 10 tamponi anali emostatici Spon Anal.

