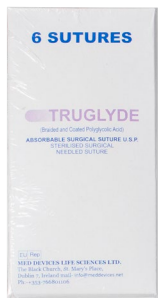






THD SLIDE ONE KIT

THD SUTURE	THD SLIDE	THD DOPPLER PROBE
		

Utilizzo

THD Slide One Kit è stato specificatamente disegnato per un utilizzo immediato con il dearterializzatore THD Evolution/THD Revolution.

Descrizione Generale

THD Slide è un anoscopio/proctoscopio appositamente progettato per un miglior utilizzo della procedura THD nel trattamento dei gradi più alti della patologia emorroidaria. La particolare forma dell'anoscopio/proctoscopio Slide, con la presenza di un carrello estraibile rende possibile realizzare legatura e risoluzione del prollasso con un solo strumento, causando quindi un minor disagio al paziente e velocizzando la procedura. L'anoscopio/proctoscopio THD Slide è realizzato in materiale plastico medicale trasparente, per permettere, insieme all'utilizzo di un puntale a fibre ottiche appositamente sagomato, un'illuminazione perfetta del campo operatorio. L'anoscopio/proctoscopio specifico THD Slide è appositamente progettato per dare la giusta tensione alla cavità anale durante l'intervento e ha un apposito alloggiamento per il porta ago THD. La sonda doppler fornita si inserisce all'interno dell'anoscopio/proctoscopio ed è a diretto contatto con la mucosa per una precisa identificazione delle arterie emorroidarie. Il box comprende 10 sonde doppler monouso in blister sterile, per un immediato utilizzo, 10 confezioni di suture assorbibili per legature da 6 suture cadauna e 10 tamponi anali emostatici Spon Anal.



Caratteristiche dimensionali	
THD SLIDE	
Dimensione interna	27x19 mm
Dimensione esterna	33x23 mm
Lunghezza operatoria	100 mm
Finestra operativa (Variabile)	30x10 mm minima
Lunghezza totale	172 mm
Lunghezza manico	105 mm

THD Slide One					
REF	Q.tà	Descrizione	Classe di rischio	N°RDM	CND
800065-10	10	THD Slide One Kit		33305	
include 710004	10	THD Slide (sterile) - con 1 proctoscopio con carrello, 1 spinginodo, 1 portaahi monouso	Ila	501597	Z12020604
include 800063	10	Sonda Doppler monouso (sterile)	Ila	501606	Z12059005
include 880000	10	Confezione di suture (6 suture - sterili)	III	51233	H010101020101
include 800050	10	Scrofolon Anal (sterili)	III	1700046	M040503

THD Slide One (Sterile)		
REF	Q.tà	Descrizione
800065-1	1	THD SLIDE ONE KIT
800065-5	5	THD SLIDE ONE KIT
800065-10	10	THD SLIDE ONE KIT

Dispositivi associati		
REF	Q.tà	Descrizione
800133	1	THD REVOLUTION
800000	1	THD EVOLUTION