




## THD BANDY

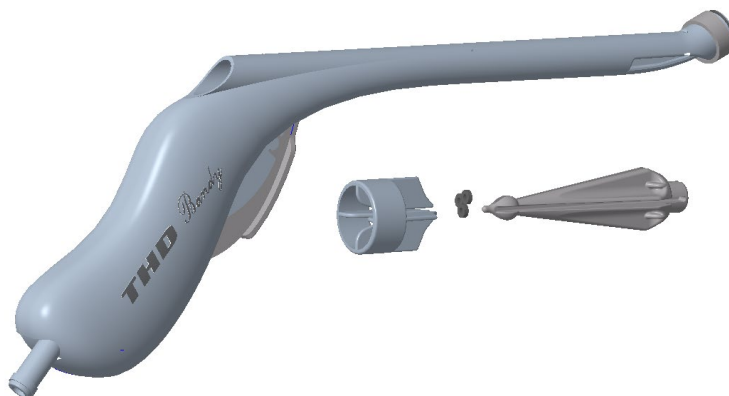

### Utilizzo

THD Bandy (ref. 800183) è dispositivo medico di Classe IIa in accordo alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE composto da un legatore emorroidario, dispositivo medico monouso unitamente ad un cono ed uno spintore. THD Bandy è destinato ad essere utilizzato per il trattamento della patologia emorroidaria di 2° grado.

### Descrizione Generale

THD Bandy (ref. 800183) è un dispositivo medico pronto all'uso composto da un legatore elastico unitamente ad un cono ed uno spintore.

Il dispositivo medico THD Bandy è un legatore elastico monouso a suzione dotato di un sistema per il caricamento di anelli elastici forniti separatamente. Si collega ad un sistema di aspirazione e consente di controllare la quantità di tessuto aspirato attraverso un'apertura che permette l'aspirazione o il rilascio della mucosa. Il particolare design del manico consente l'utilizzo con una sola mano nonché un veloce e sicuro rilascio dell'elastico.

### Caratteristiche legatore elastico THD Bandy (ref. 800183)

- Realizzato in Policarbonato di grado medicale, monouso
- Conforme ai requisiti di biocompatibilità stabiliti dalla ISO 10993
- Sistema di caricamento rapido degli anelli
- Pronto all'uso


THD S.p.A. Via dell'Industria, 1 42015 Correggio (RE), Italy – Tel +39 0522 634311 Fax +39 0522 634371 – [www.thdlab.com](http://www.thdlab.com)



- Leggero e maneggevole
- Dispositivo CE di classe IIa
- Confezionato singolarmente
- Latex Free

**Vantaggi**

- Utilizzabile con una mano
- Caricamento facilitato dell'elastico

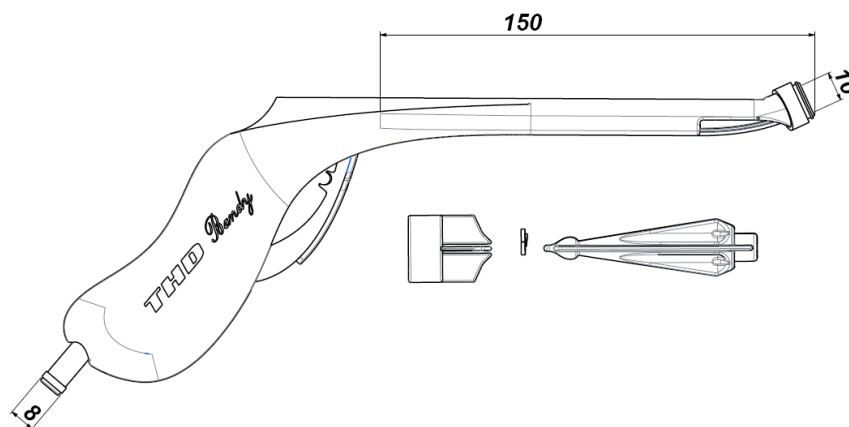**Caratteristiche dimensionali THD Bandy (ref. 800183)**

Lunghezza esclusa impugnatura	150 mm
Diametro interno imboccatura	10 mm
Diametro collegamento aspiratore	8 mm

THD Bandy					
REF	Q.tà	Descrizione	Classe di rischio	CND	RDM
800183	/	25 THD Bandy (DM) Costituito da: Legatore monouso; Cono di caricamento; Spintore per caricamento anelli	IIa	G020401	2292570

Accessori compatibili	
Prodotto	Descrizione
Anelli elastici per legatura	-Materiale: Isoprene -Diametro interno 1.9mm -Diametro esterno: 4.5mm

THD S.p.A. Via dell'Industria, 1 42015 Correggio (RE), Italy – Tel +39 0522 634311 Fax +39 0522 634371 – www.thdlab.com