



THD FACE MASK

THD F3 pinkbarrier



Made in Italy



NOTA: Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto; si rimanda alla tabella dei codici prodotto per varianti disponibili.

CLASSIFICAZIONE:

Dispositivo medico di Classe I secondo Regolamento (UE) 2017/745

TIPO

Maschera facciale ad uso medico di **tipo II**, monouso, non sterile, latex free.

DESTINAZIONE D'USO

THD Face Mask – THD F3 pinkbarrier è un dispositivo medico monouso non sterile destinato a ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di personale sanitario e/o di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici.

DESCRIZIONE

THD F3 pinkbarrier è classificata come mascherina chirurgica di tipo II secondo standard EN 14683, idonea a coprire bocca, naso e mento di chi la indossa e assicurando una stretta aderenza ai lati.

THD F3 pinkbarrier è specificatamente progettata **per limitare la trasmissione di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di personale sanitario e/o di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici** con un'Efficienza di Filtrazione Batterica (BFE) superiore al 99%, grazie ad un multistrato di TNT in polipropilene e poliestere con strato filtrante interno.

Le efficienti proprietà di filtraggio e la buona vestibilità della mascherina chirurgica THD F3 pinkbarrier forniscono una valida soluzione in termini di:

- **Comfort:** Lo strato a contatto con la pelle è morbido e non abrasivo. I morbidi elastici assicurano che la maschera aderisca strettamente ai lati del viso di chi la indossa con il massimo confort.
- **Protezione:** lo strato interno garantisce le proprietà filtranti bloccando più del 99% della penetrazione degli agenti infettivi.
- **Alta respirabilità:** il materiale consente un'agevole flusso d'aria in entrambe le direzioni.

CARATTERISTICHE:


- Ottima resistenza alla penetrazione batterica con **potere filtrante BFE > 99%**
- Buona permeabilità all'aria che garantisce un'**alta respirabilità**
- Ottima vestibilità ed elastici confortevoli
- Composta da tre strati di TNT
- Adattatore nasale conformabile, utile per ridurre l'appannamento degli occhiali
- Buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale
- Ultraleggera
- Ipoallergenica
- Grado di contaminazione (bioburden): inferiore a 30 UFC/g

MATERIALI: Tessuto Non Tessuto (TNT) – Spunbond/Meltblown

COMPOSIZIONE CHIMICA: polipropilene, poliestere



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO/UTILIZZO:

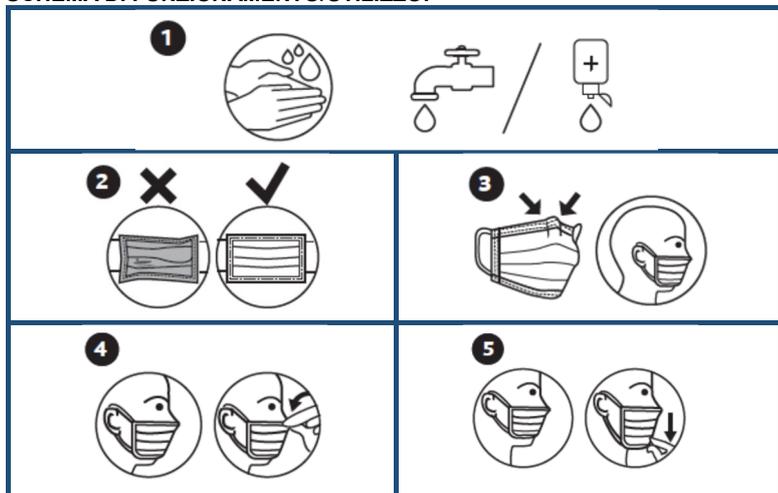

MANUTENZIONE: Non necessaria, dispositivo monouso.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO: Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

PRECAUZIONE DI UTILIZZO: Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o scucito.

CONTROINDICAZIONI: Non ci sono particolari controindicazioni nell'utilizzo di questo dispositivo medico.

MODALITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO: Non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto.

Lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se la mascherina non risulta utilizzata.

In caso di utilizzo, la mascherina dovrà essere smaltita:

- In ambito domestico, nella raccolta indifferenziata
- In ambito ospedaliero/professionale, negli appositi contenitori dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo

Caratteristiche THD Face Mask – THD F3 pinkbarrier		
Taglie	Regular Fit	Junior
Dimensioni – Larghezza	17,5 cm	14,5 cm
Dimensioni – Altezza (mascherina plissettata)	9,5 cm	9,5 cm
Elastici - Lunghezza	Standard	Junior
Materiale	3 strati di TNT Polipropilene/Poliestere: - strato esterno e strato a contatto pelle in TNT Spunbond - strato intermedio con proprietà filtranti in TNT Meltblown	
Colore	Rosa lato esterno – bianco lato interno	
Sterilizzazione	Non Sterile	
Standard Applicati	EN14683 / ISO10993-1	
Classificazione prodotto	Dispositivo medico di Classe I secondo Regolamento (UE) 2017/745	
Classificazione EN14683	Maschera facciale ad uso medico di Tipo II	
Efficienza di filtrazione batterica (BFE)	> 99%	
Pressione differenziale (Pa/cm ²)	< 40	
Pulizia microbica	≤ 30 UFC/g	

REF	Denominazione	Descrizione	Taglia	Q.tà	RDM	CND
800276	THD FACE MASK F3 20 R M R	THD F3 pinkbarrier - 20 pz - Regular	Regular Fit	20 pz	2127537	T020601
800277	THD FACE MASK F3 20 R M J	THD F3 pinkbarrier - 20 pz - Junior	Junior	20 pz	2127595	T020601