



# THD SLIDE ONE FAST

| THD SLIDE                                                                         | THD DOPPLER PROBE                                                                 | THD SUTURE                                                                         | THD BLOCK                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

## Utilizzo

THD Slide One Fast è un kit specificatamente disegnato per un utilizzo immediato con il dearterializzatore THD Revolution.

## Descrizione Generale

THD Slide è un anoscopio/proctoscopio appositamente progettato per un miglior utilizzo della procedura THD nel trattamento dei gradi più alti della patologia emorroidaria. La particolare forma dell'anoscopio/proctoscopio Slide, con la presenza di un carrello estraibile rende possibile realizzare legatura e risoluzione del prollasso con un solo strumento, causando quindi un minor disagio al paziente e velocizzando la procedura. L'anoscopio/proctoscopio THD Slide è realizzato in materiale plastico medico trasparente, per permettere, insieme all'utilizzo di un puntale a fibre ottiche appositamente sagomato, un'illuminazione perfetta del campo operatorio. L'anoscopio/proctoscopio specifico THD Slide è appositamente progettato per dare la giusta tensione alla cavità anale durante l'intervento e ha un apposito alloggiamento per il porta ago THD. La sonda doppler fornita si inserisce all'interno dell'anoscopio/proctoscopio ed è a diretto contatto con la mucosa per una precisa identificazione delle arterie emorroidarie.


Il box di THD Slide One Fast comprende:

- 10 kit THD Slide monouso in blister sterile, per un immediato utilizzo
- 10 sonde doppler monouso in blister sterile, per un immediato utilizzo
- 10 confezioni di THD Suture (6 suture cadauna): suture chirurgiche riassorbibili; ago 5/8 – 26,5 mm
- 10 confezioni di THD Block (3 suture cadauna): suture chirurgiche riassorbibili con sistema autobloccante, unidirezionale con sistema di arresto finale; ago 1/2 cerchio – 30 mm
- 10 tamponi anali emostatici Spon Anal



## Caratteristiche dimensionali

## THD SLIDE

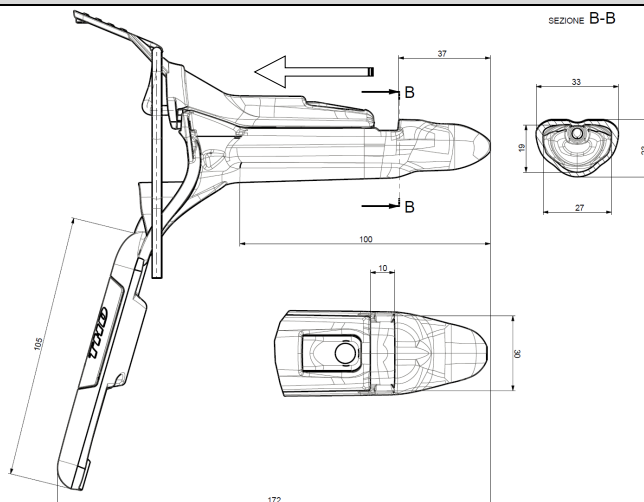

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Dimensione interna             | 27x19 mm        |
| Dimensione esterna             | 33x23 mm        |
| Lunghezza operatoria           | 100 mm          |
| Finestra operativa (Variabile) | 30x10 mm minima |
| Lunghezza totale               | 172 mm          |
| Lunghezza manico               | 105 mm          |

## THD Slide One Fast

| REF            | Q.tà | Descrizione                                                                             | Classe di rischio | N°RDM               | EMDN          |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 800280-10      | 10   | THD Slide One Fast                                                                      | -                 | 142413*<br>142415** | Z12020604     |
| include 710004 | 10   | THD Slide (sterile) - con 1 proctoscopio con carrello, 1 spinginodo, 1 portaghi monouso | Ila               | 2557087             | Z12020604     |
| include 800063 | 10   | Sonda Doppler monouso (sterile)                                                         | Ila               | 2558142             | Z12059005     |
| include 880059 | 10   | THD Block (3 suture - sterili)                                                          | III               | 1169775             | H010101010301 |
| include 800050 | 10   | Scrofolon Anal (sterili)                                                                | III               | 1700046             | M040503       |
| include 880000 | 10   | THD Suture (6 suture - sterili)                                                         | III               | 2333893*            | H0101010201   |
| o              |      |                                                                                         |                   |                     |               |
| include 880000 | 10   | THD Suture (6 suture - sterili)                                                         | III               | 841228**            | H0101010201   |

\*KIT Contenente suture Truglyde

\*\*KIT Contenente suture Assufil

## Dispositivi associati

| REF    | Q.tà | Descrizione    |
|--------|------|----------------|
| 800133 | 1    | THD REVOLUTION |