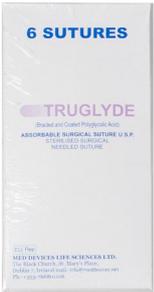




THD SLIDE

THD SUTURE	THD SLIDE	THD DOPPLER PROBE
		

Utilisation

Le THD SLIDE est spécifiquement conçu pour être utilisé avec le Générateur doppler THD Evolution/Revolution pour faire la de-arterialisation et la Muco-pexy.

Description générale

Le THD SLIDE est un anoscope/ proctoscope spécialement conçu pour l'amélioration de la procédure de THD, tout en traitant les grades les plus élevés de la maladie hémorroïdaire. La forme spécifique del anoscope/ proctoscope Slide, réduit la maladie pour le patient et accélère la procédure. La forme particulière del anoscope/proctoscope, avec le support de sonde coulissant, permet de réaliser la ligature et la réduction du prolapsus avec un seul outil. Le anoscope/proctoscope THD SLIDE est faite d'une matière plastique transparente qui permet, avec l'utilisation de la canule courbe et le câble à fibre optique, un éclair parfaite du champ opératoire. Le anoscope/ proctoscope THD SLIDE est conçu pour maintenir une droit tension de la cavité anale pendant le traitement et présente loges pour le porte-aiguille THD. La sonde Doppler fourni s'adapte dans el anoscope/proctoscope et est en contact avec la muqueuse anale pour une détection précise des artères hémorroïdaires. La boîte de THD SLIDE contient 2 sondes doppler réutilisable 5 fois avec nettoyage preventif et stérilisation. La boîte contient également 10 paquets de sutures absorbables (6 points de suture à chaque paquet) et 10 Spon-Anal éponges hémostatiques.



Caractéristiques dimensionnelles	
THD SLIDE	
Taille interne	27x19 mm
Taille externe	33x23 mm
Longueur opérationnelle	100 mm
Taille fenêtre latérale (modifiable)	30x10 mm minimale
Longueur totale proctoscope	172 mm
Longueur manche	105 mm

THD SLIDE				
Code	Qté	Description	Classe de risque	EMDN
800066-10	10	THD Slide	-	-
<i>avec</i> 710004	10	THD Slide (stérile)	IIa	Z12020604
<i>avec</i> 800056	2	Sonde doppler Slide (5 usage)	IIa	Z12059005
<i>avec</i> 880000	10	Paquet contient 6 sutures absorbable	III	H0101010201
<i>avec</i> 800050	10	Scrofolon Anal (stérile)	III	M040503

DISPOSITIFS CONNECTÉS		
Code	Qté	Description
800133	1	THD REVOLUTION