



THD SURGY STERILE USAGE UNIQUE



Utilisation

L'anuscope THD SURGY est un dispositif médical STERILE à USAGE UNIQUE indiqué pour l'analyse et la chirurgie du canal ano-rectal.

Description générale

Sa conception compacte permet un accès facile à l'anus, permettant ainsi une bonne dilatation et une rétraction douce de la muqueuse, sans aucun traumatisme du sphincter. La large fente latérale permet une visualisation optimale du canal anal et améliore le champ opératoire.

La conception asymétrique étend le canal anal latéralement et évite le prolapsus de la muqueuse.

THD Surgy est fabriqué à partir de matériaux


plastiques transparents de qualité médicale de qualité supérieure. Il est conçu pour être connecté à un illuminateur, via la pointe courbée en fibre optique spécialement conçue.

Caractéristiques

- Fabriqué en polycarbonate de qualité médicale
- Conforme aux exigences de biocompatibilité établies par la norme ISO 10993
- Profil d'insertion atraumatique
- Peut être utilisé avec la THD fibre optique courbe
- Extrêmement compact
- Prêt à l'emploi
- Léger (40 g)
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Dispositif CE de Classe I
- Emballage individuel
- Sans latex

**Avantages :**

- pas besoin de préparation avant l'emploi
- aucun risque de contamination croisée
- faible encombrement, manipulation facile
- mini-invasif, atraumatique
- stérile

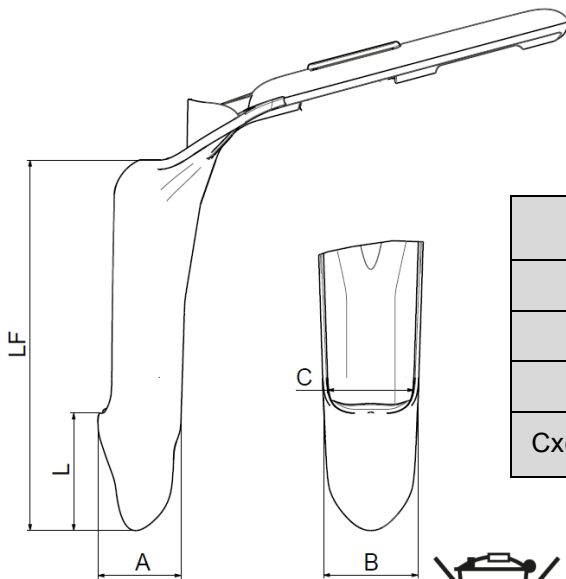

		Surgy mini	Surgy Maxi
C	Largeur interne	23 mm	28 mm
B	Largeur	26 mm	31 mm
A	Largeur	23 mm	27 mm
LF	Longueur	122 mm	122 mm
Cx(LF-L)	Fenêtre d'exploitation	23x85 mm	28x85 mm



Au terme de l'utilisation, éliminer le rectoscope THD Light-Scope doté de LED comme déchet hospitalier conformément aux lois en vigueur.



Dans le cas où le rectoscope THD Light-Scope doté de LED devrait être éliminé avant utilisation (par exemple si la date de péremption est dépassée ou en cas de dommage), ne pas l'éliminer avec les déchets ordinaires. Le dispositif contient des composants électriques.

THD Surgy Sterile		
Code	Qté	Dénomination
800004	10	THD Surgy Mini stérile
800005	10	THD Surgy Maxi stérile