




# THD BANDY

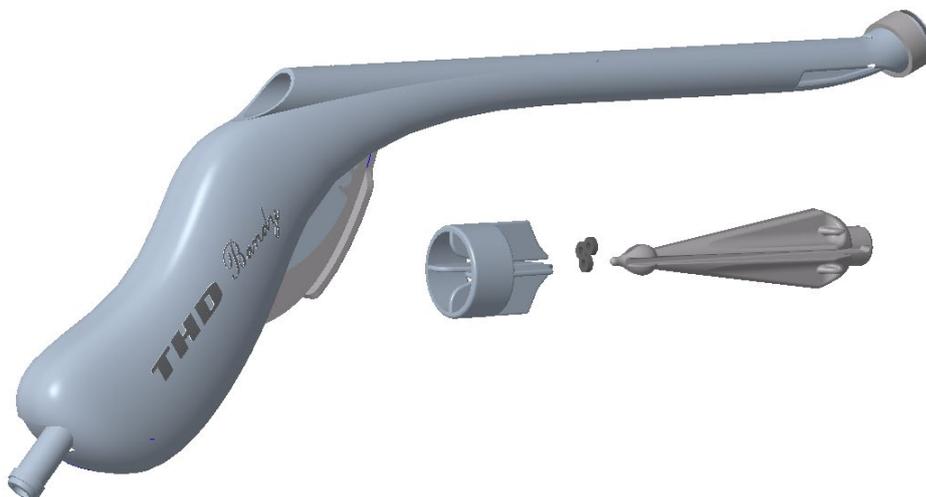

## Utilisation

THD Bandy est un dispositif médical à usage unique pour le traitement des maladies hémorroïdaires de 2ème degré.

## Description générale

THD Bandy est un kit composé d'un instrument de ligature élastique par aspiration, de 4 anneaux élastiques et d'un système de chargement des élastiques prêt à l'emploi.

THD Bandy est relié à un système d'aspiration et permet de contrôler la quantité de tissu aspiré à travers une ouverture par laquelle se fait l'aspiration ou la libération de la muqueuse.


La forme particulière du manche permet une utilisation d'une seule main ainsi qu'une mise en place rapide et sûre de l'élastique.

## Caractéristiques

- Fabriqué en polycarbonate de qualité médicale
- Conforme aux exigences de biocompatibilité établies par la norme ISO 10993
- Fourni avec 4 anneaux à usage unique
- Système de chargement rapide des anneaux
- Prêt à l'emploi
- Léger et maniable
- Dispositif CE de Classe IIa
- Emballage individuel
- Sans latex

Avantages

- Utilisable d'une seule main
- Chargement facilité de l'élastique

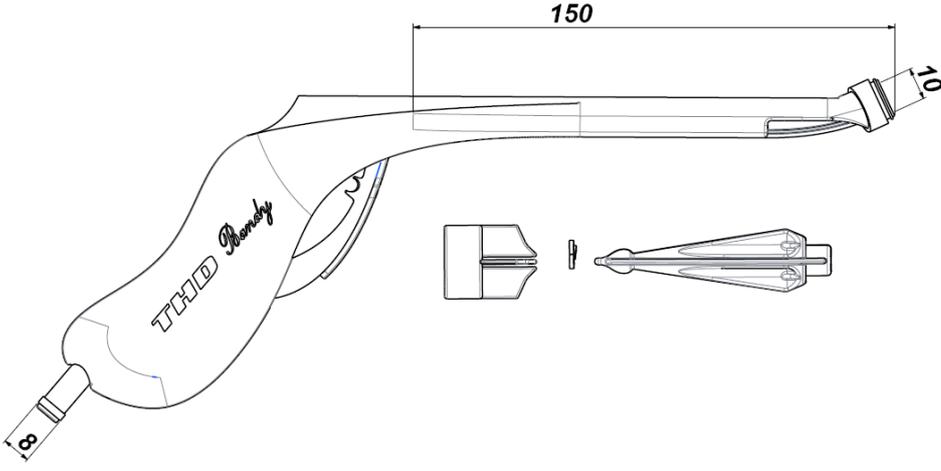Dimensions	
	
Longueur sans manche	150 mm
Diamètre interne	10 mm
Diamètre du raccord pour aspirateur	8 mm

THD Bandy			
RÉF.	Qté	Description	Classe de risque
800079-10	10	THD Bandy	IIA
include	/	10 Ligateur à usage unique	
include	/	10 Cône de chargement	
include	/	10 Cylindre pour application des anneaux	
include	/	40 Élastiques pour ligature	