



# THD FACE MASK

## THD F3 whitebarrier



Made in Italy



REMARQUE: L'image a pour seul but de présenter le produit; veuillez-vous référer au tableau des codes produit pour les variantes disponibles

### CLASSIFICATION:

Dispositif médical de Classe I suivant le Règlement (UE) 2017/745

### TYPE

Masque facial à usage médical de type II, à usage unique, non stérile, latex free

### DESTINATION D'UTILISATION

THD Face Mask – THD F3 whitebarrier est un dispositif médical à usage unique non stérile ayant pour but de réduire l'émission d'agents infectieux par le nez et par la bouche du personnel de santé et/ou d'un porteur asymptomatique ou d'un patient ayant des symptômes cliniques.

### DESCRIPTION

THD F3 whitebarrier est classé comme masque chirurgical de type II suivant le standard EN 14683, apte à couvrir la bouche, le nez et le menton de celui qui le porte et en assurant une bonne adhésion sur les côtés.

THD F3 whitebarrier est spécifiquement conçu pour limiter la transmission d'agents infectieux par le nez et la bouche du personnel de santé et/ou d'un porteur asymptomatique ou d'un patient avec des symptômes cliniques avec une Efficacité de Filtration Bactérienne (BFE) supérieure à 99%, grâce à un multicouche de tissu non-tissé en polypropylène et polyester avec couche filtrante interne.

L'efficacité des propriétés de filtration et la conformation anatomique du masque chirurgical THD F3 whitebarrier fournissent une bonne solution en terme de:

- **Confort:** La couche en contact avec la peau est douce et non abrasive. Les confortables élastiques assurent la complète adhésion sur les côtés du visage de celui qui le porte avec le maximum de confort.
- **Protection:** la couche interne garantit les propriétés filtrantes bloquant plus de 99% de la pénétration d'agents infectieux
- **Haute respirabilité:** le matériel consent à un flux aisé d'air dans les deux directions.

### FEATURES:


- Excellente résistance à la pénétration bactérienne avec **pouvoir filtrant BFE > 99%**
- Bonne porosité à l'air garantissant une **haute respirabilité**
- Excellente portabilité et élastiques confortables
- Composée de trois couches de tissu non-tissé
- Barrette nasale conformable, utile pour réduire la buée sur les lunettes
- Bonne résistance à la traction aussi bien longitudinale que transversale
- Ultralégère
- Hypoallergénique
- Degré de contamination (bioburden) : inférieur à 30 CFU/g

**MATÉRIAUX:** Tissu non-tissé (TNT) – Spunbond/Meltblown

**COMPOSITION CHIMIQUE:** polypropylène, polyester



## SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT/UTILISATION:

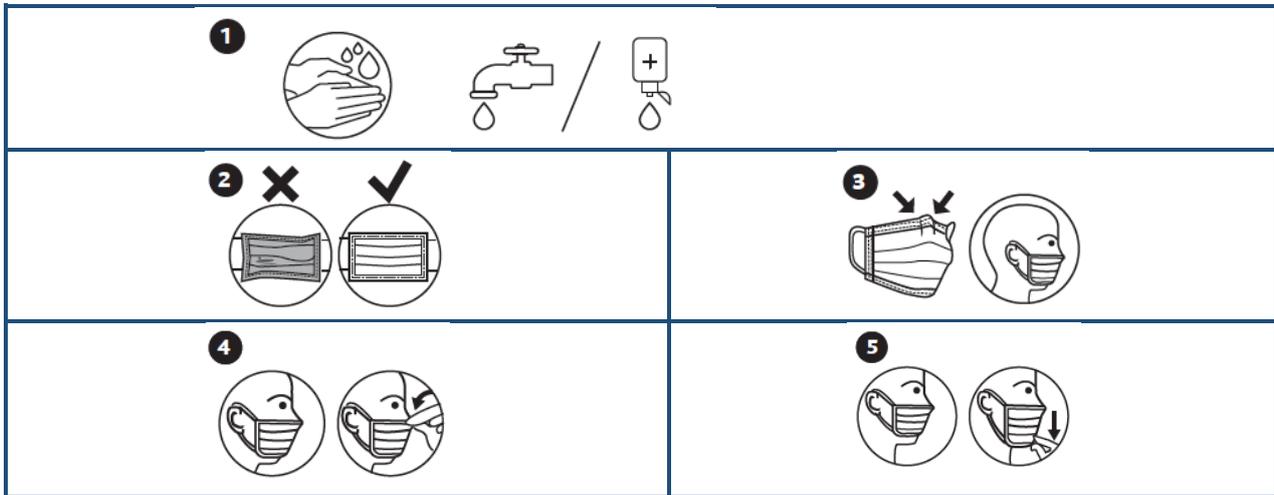

**ENTRETIEN:** Non nécessaire, dispositif à usage unique.

**CONSERVATION ET MANIPULATION DU DISPOSITIF:** Conserver à température ambiante, sans exposition à l'humidité ou à la chaleur directe.

**PRÉCAUTION D'UTILISATION:** Ne pas utiliser en cas de défauts évidents comme le TNT endommagé, percé ou décousu

**CONTRE-INDICATIONS:** Il n'y a pas de contre-indications particulières à l'utilisation de ce dispositif médical.

**MODALITÉ DE TRANSPORT ET D'ÉLIMINATION:** Il n'y a pas d'indications particulières pour la gestion du transport. L'élimination doit être effectuée comme pour les déchets solides si le masque n'a pas été utilisé. Quand il a été employé, le masque doit être jeté :

- Dans un cadre domestique, avec les déchets non recyclables
- Dans le cadre hospitalier/professionnel, dans les récipients dédiés aux déchets dangereux à risque infectieux

Caractéristiques THD Face Mask – THD F3 whitebarrier			
Tailles	Regular Fit	Small Fit	Junior
Dimensions - Longueur	17,5 cm	14,5 cm	14,5 cm
Dimensions - Hauteur (masque à plis)	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
Elastiques - Longueur	Standard	Standard	Junior
Matériau	3 couches en tissu non-tissé made en Polypropylène/Polyester: - couche externe et couche de contact avec la peau en TNT Spunbond - couche intermédiaire avec des propriétés de filtrage en TNT Meltblown		
Couleur	Blanc extérieur / intérieur		
Stérilisation	Non Stérile		
Standard Appliqués	EN14683 / ISO10993-1		
Classification produit	Dispositif médical de Classe I suivant le Règlement (UE) 2017/745		
Classification EN14683	Masque facial à usage médical de <b>Type II</b>		
Efficacité de filtration bactérienne (BFE)	> 99%		
Pression différentielle (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40		
Propreté microbienne	≤ 30 CFU/g		

REF	Dénomination	Description	Taille	Q.té
800247	THD FACE MASK F3 50 B M R	THD F3 whitebarrier - 50 pcs - Regular	Regular Fit	50 pcs
800243	THD FACE MASK F3 20 B M R	THD F3 whitebarrier - 20 pcs - Regular	Regular Fit	20 pcs
800248	THD FACE MASK F3 20 B M S	THD F3 whitebarrier - 20 pcs - Small	Small Fit	20 pcs
800259	THD FACE MASK F3 20 B M J	THD F3 whitebarrier - 20 pcs - Junior	Junior	20 pcs