

THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)



Uso

La A1250 Electrosurgical Unit es un producto multiuso para procedimientos quirúrgicos monopolares y bipolares.

Descripción general

La A1250 Electrosurgical Unit es la solución electroquirúrgica para quirófanos y centros quirúrgicos. Esta unidad electroquirúrgica dispone de 5 salidas de energía comunes que alcanzan a 120 vatios de potencia: corte, doblado, coagulación, fulguración y estándar bipolar.

Datos técnicos	
Altura	15.2 cm
Anchura	26 cm
Profundidad	30.5 cm
Peso	<4 kg
Tensión de alimentación	100-240 V CA
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Frecuencia de salida	350-600 kHz



THD A1250 ESU: ACCESORIOS

THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION

REF. 800206

El Smoke-Evac Fusion Hand Piece es un lápiz para electrocirugía con canal de aspiración de humos integrado. La pieza de mano dispone de dos botones: Corte (amarillo) y Coagulación (azul). El producto está pensado para ser utilizado con el Smoke-Evac Fusion Probes para crear un entorno quirúrgico libre de humos perjudiciales.



THD A1252C REUSABLE GROUNDING

REF. 800205


El Reusable Grounding Cable – ESU se utiliza con los Disposable Grounding Pads – ESU (800204) para garantizar un procedimiento electroquirúrgico sin riesgos. El control de neutralidad del electrodo suministrado por Bovie (NEM) aumenta la seguridad para el paciente, ya que comprueba de forma automática que el cable o la almohadilla estén conectados correctamente. Este producto está testado para 100 usos. El producto se vende por separado.



THD GBS-DM1040A DIS GROUNDING

REF. 800204

El Disposable Grounding Pad – ESU se utiliza con el Reusable Grounding Cable – ESU (800205) para garantizar un procedimiento electroquirúrgico sin riesgos. Esta almohadilla de conexión a tierra dispone de un adhesivo con gel para la conexión correcta del paciente y, si se aplica correctamente, minimiza la posibilidad de choque eléctrico o de quemadura. El producto se vende por separado.

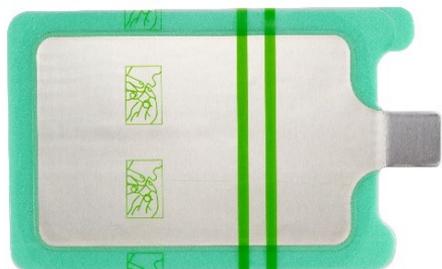

**THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION****REF. 800207**

El Smoke-Evac Fusion Suction Tubing Kit es un tubo de 2.5 metros de longitud con conectores de succión en cada extremo. Los conectores están diseñados para acoplarse con un terminal macho de 8-10 mm. El Tubing kit está destinado a la aspiración de los gases y aerosoles producidos en procedimientos de electrocirugía. No se puede utilizar con líquidos. Utilizar el tubing kit con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) y con Smoke-Evac Fusion Probes para un campo operatorio sin humos. El producto se vende por separado.

THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING**REF. 800208**

El Smoke-Evac Fusion Tissue Catch Tubing Kit es un tubo de 2.5 metros de longitud con conectores de succión en cada extremo. Los conectores están diseñados para acoplarse con un terminal macho de 8-10 mm. El Tubing kit está destinado a la aspiración de aerosoles, gases y fluidos en procedimientos de electrocirugía. Utilizar con Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) y con Smoke-Evac Fusion Probes para un campo operatorio sin humos y para tener un sistema de aspiración de fluidos integrado sin activar el Smoke-Evacuator Filter. El producto se vende por separado.

THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT)		
Código	Cant.	Descripción
800182	1	THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)
800206	1	THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION
800205	1	THD A1252C REUSABLE GROUNDING
800204	1	THD GBS-DM1040A DIS GROUNDING
800207	1	THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION
800208	1	THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING